

MADE IN ITALY

Lella la coccinella

THE LADYBUG

Simpatia da respirare!

**SISTEMA
COMPLETO PER
AEROSOLTERAPIA**

COMPLETE SYSTEM
FOR AEROSOL THERAPY

over 40 years
MADE IN ITALY
by FLAEM[®]
a healthy lifestyle

Doccia Nasale Rhino Clear

Rhino Clear nasal wash



Trattamento specifico delle Alte vie respiratorie
Treatment of upper airways

Caratteristiche tecniche DOCCIA NASALE

NASAL WASH technical features

Tempo di nebulizzazione di 10 ml NaCl Nebulisation time for 10 ml NaCl	2' 10" (minutes)
Valori rilevati con procedura interna Flaem Results are as per Flaem procedure	10 ml
MMAD	48 µm
% < 10 µm	3.2
Valori rilevati con sistema Laser Malvern Mastersizer (presso un laboratorio esterno certificato) Test results were derived using a Malvern Mastersizer Laser System (in a certified laboratory)	
Capacità massima Maximum fill volume	

Ampolla RF6 basic²

RF6 basic² nebuliser



Trattamento dell'intero tratto respiratorio
Treatment of the whole respiratory tract

Caratteristiche tecniche NEBULIZZAZIONE


NEBULISATION technical features

		STANDARD MOD.	HIGH SPEED MOD.
Erogazione ⁽¹⁾ Delivery ⁽¹⁾	ml/min	0.32	0.42
MMAD ⁽²⁾	µm	3.6	3.6
Frazione respirabile < 5 µm ⁽²⁾ Breathable fraction < 5 µm (FPF) ⁽²⁾	%	66	67
(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente. (1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5 Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity			
(2) Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta. (2) In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request.			
Capacità massima Maximum fill volume	8 ml		

Caratteristiche tecniche

Technical features

Mod. P0406EM F700

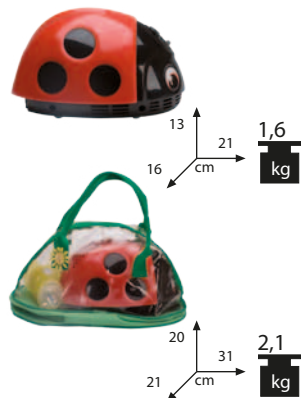

Alimentazione/Potenza: 230V~ 50Hz 140VA
Power supply/Power: Other voltages available on request

Omologazioni

Approvals

Compressore silenzioso (esente da lubrificazione e da manutenzione) Silenced compressor (designed for use without lubrication or maintenance)	
Filtraggio aria: Air filtration:	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)
Portata aria al compressore: Compressor air output:	10 l/min (approx).
Pressione Max: Max pressure:	2,6 ± 0,4 bar (approx).
Rumorosità (a 1 m): Sound level (at 1 m):	55 dB(A) (approx.)
Garanzia: Warranty:	5 ANNI Please refer to your local dealer

Conforme alla **Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici"** (solo per unità 230 V ~ 50 Hz)
In compliance with **93/42/EEC Medical Device Directive** (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)

In conformità alla Norma Europea **EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici"**
In compliance with **European standard EN 10993-1 Biological evaluation of medical devices**

Conforme alla Norma **EN 60601-1 e EN 60601-1-11** (solo per unità 230 V ~ 50 Hz)
In compliance with **std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11** (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)



Accessori in dotazione

Accessories	Cod.
Kit Ampolla RF6 basic ² con Boccaglio	ACO367P
Doccia Nasale Rhino Clear	08208
Tubo di collegamento da 2 m	ACO225P
Mascherina adulto in PVC	ACO79
Mascherina pediatrica in PVC	ACO89
Kit ricambi filtri aria (2 pezzi)	ACO439P
Favola per bambini	11775
Comoda borsa contenitore	11296



LELLA LA COCCINELLA F700

Codice Code

C003P00

Imballo Master carton

n° 6 Pz 6 pieces



8 018294 008246

11799A0-0 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A. - 2013 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. - FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante / Manufacturer:
FLAEM NUOVA S.p.A
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A.
è un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Export Department of FLAEM NUOVA



3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com