






Syst'am® DP 100+

Leistungsstarkes Inhalationsgerät zur Aerosoltherapie und Befeuchtung

Der Syst'am® DP 100+ ist mit einem Verneblungs- und einem Befeuchtungsset ausgestattet. Das Verneblungsset verfügt über das patentierte System Control'Dose®, welches u.a. das Restvolumen im Gerät reduziert und für eine optimale Wirkstoffausbeute sorgt. Das Befeuchtungsset verfügt über ein geschlossenes Einwegsystem ohne direkten Kontakt zum Gerät, um Ansteckungsrisiken vorzubeugen. Es kann für fast alle Flaschenarten (zur Dauerverneblung) verwendet werden. Darüberhinaus bietet der Syst'am® DP 100+ zahlreiche Bedienfelder und **Funktionen:** Automatische Abschaltung, Zeitschaltuhr, automatisches Speichern der letzten Sitzung, Steuerung der Quarzlebensdauer, intelligentes Alarmsystem, Regulierung der Temperatur, ...


-  Made in France
-  Kürzere Therapiesitzungen
-  Einfache Bedienung
-  Hohe Patientenakzeptanz und Therapietreue
-  Automatische Abschaltung nach Medikamentenverbrauch
-  Geräuscharmer Betrieb
-  Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Ultraschallvernebler

Lieferumfang

- ✓ Ultraschall Inhalationsgerät
- ✓ Control'Dose mit Deckel
- ✓ Erwachsenenmaske
- ✓ Bakterien- & Staubfilter
- ✓ Schlauch- & Flaschenhalterung
- ✓ 2 Medikamenteneinsätze
- ✓ 3 Schläuche
- ✓ Netzteil
- ✓ Gebrauchsanweisung



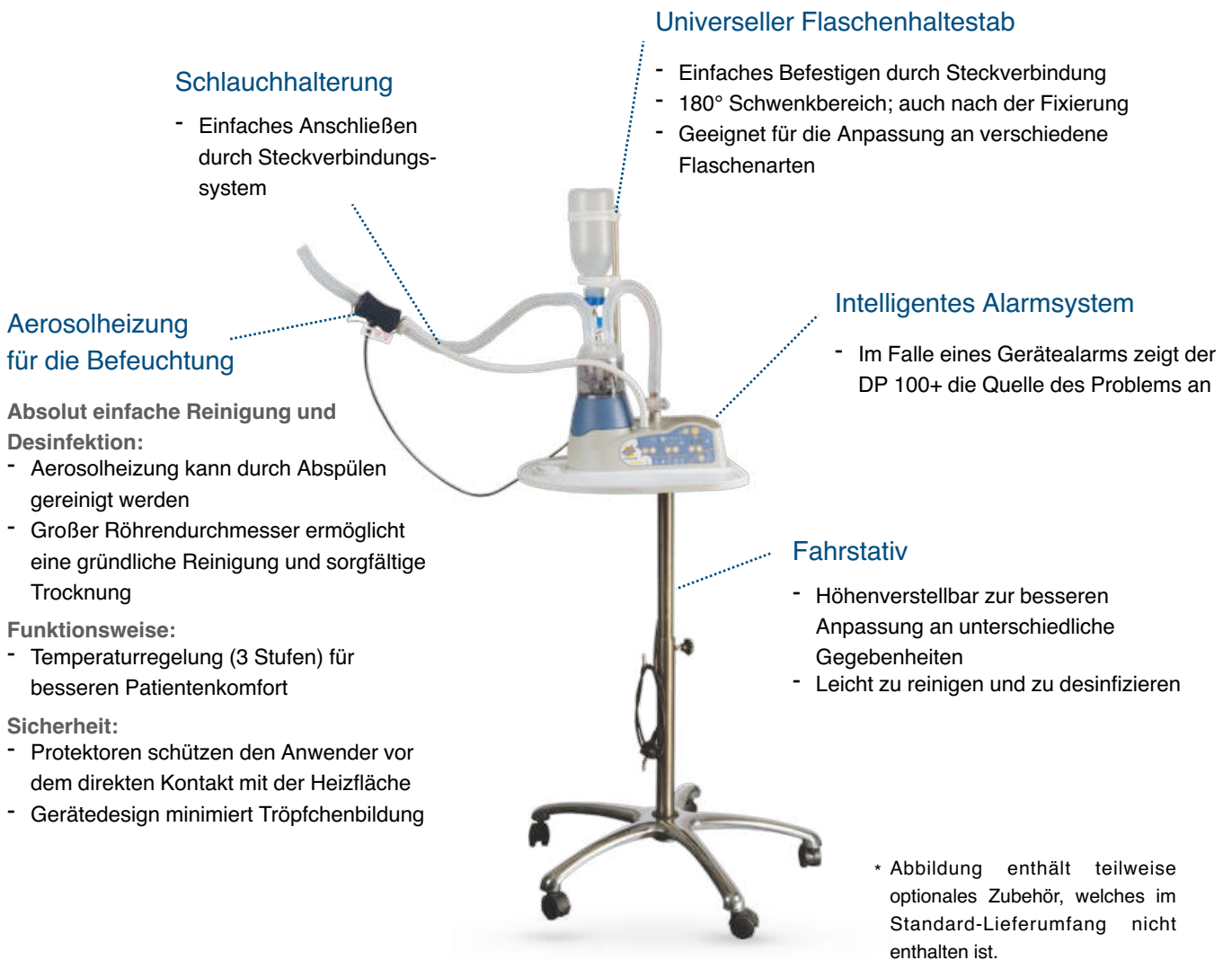

Technische Daten

Verneblungsart	Ultraschall	Therapie	Untere Atemwege & Obere Atemwege
Nennspannung	100 - 240 V	Lautstärke	geräuscharm
Nennfrequenz	50 - 60 Hz	Gewicht	4 kg
Aufnahmeleistung	max. 80 VA	Maße [mm]	333 x 205 x 102
Schwingfrequenz	2,4 mHz	Max. Füllmenge	8 ml (mit Control'Dose); 30 ml (ohne Control'Dose)
Verneblerleistung	~ 0,8 ml/min (mit Control'Dose); ~ 2,6 ml/min (ohne Control'Dose)	Min. Füllmenge	2 ml
Tröpfchengröße	MMAD ~ 4,2 µm; 71% < 5 µm	Restmenge	< 1ml abhängig vom Medikament

Zubehör & Ersatzteile —

Syst'am® DP 100+

		Art.-Nr.	PZN
	Keramische Heizung - Aerosolheizung für die Befeuchtung - Temperaturregelung in 3 Stufen - (Hitze-)Protektoren	85695	3365239
	5-Fußstativ - Höhenverstellbar: 55 - 93 cm	85660	3365297
	1-Liter Wasserflasche mit Befeuchtungsset - 1-Liter Wasserflasche - Anschlusssteile - Staub- & Bakterienfilter - Schläuche (115 cm)	85580	3365162
	Inhalationsset		
	Erwachsene	85450	1531604
	Kinder (1-10 Jahre)	85460	11078502
	Babys	85470	11078471
	Je 1 Bakterien- & Staubfilter, 2 Medikamenteneinsätze, 3 Schläuche, 1 Maske, 1 Control'Dose mit Deckel		
	Bakterienfilter - 1 Stück	85641	3365392
	Kondenswasserabscheider (vollständig)		
	1 Stück 10 Stück Individuelles Befeuchtungsset mit Schläuchen und Wasserfalle	85657 85655	11078583 3365564
	Befeuchtungsset I - Für Flaschen mit Schraubverschluss - Verneblerkammer und Anschlusssteile	85560	3365759
	Befeuchtungsset II - Für Flaschen mit Schraubverschluss - Anschlusssteile - Staub- & Bakterienfilter - Schläuche (115 cm)	85630	11078577
	Befeuchtungsset (vollständig) - Für Flaschen mit Schraubverschluss - Verneblerkammer - Anschlusssteile - Staub- & Bakterienfilter - Schläuche (115 cm)	85571	3365771