










Multisonic® InfraControl 81610


Das Gerät, das sich rechnet
- smart & mobil -

Der Multisonic® InfraControl 81610 wurde speziell für die Therapie mit teuren Medikamenten entwickelt. Er erzeugt - im Gegensatz zu den meisten anderen Geräten - keinen eigenen Austrag bei der Aerosolerzeugung. Dadurch und mithilfe seiner Ventilsteuerung ist weniger Medikamenteneinsatz vonnöten. Außerdem ist das Gerät mit einer druckdichten Verneblerkammer ausgestattet und die Ventile befinden sich außerhalb des Aerosollflusses, wodurch kein Aerosol an den Ventilen hängenbleibt. Dadurch erhöht sich die Effizienz des Systems entscheidend. Nahezu 90% des, in der Verneblerkammer erzeugten, Medikamentenaerosols stehen am Mundstück zur Verfügung.

-  Made in Germany
-  Kosteneffizient bei teuren Medikamenten
-  Einfache Bedienung
-  Automatische Abschaltung nach Medikamentenverbrauch
-  Lautloser Betrieb
-  Klein und transportabel
-  Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
-  Leicht durchführbare Reinigung und Desinfektion von Gerät und Zubehör
-  Vasoreagibilitätstestung möglich

Lieferumfang

- ✓ **Ultraschall Inhalationsgerät**
- ✓ **Verneblerkopf & Mundstück**
- ✓ **Luer/Lock-Verschlusskappe**
- ✓ **Einatemventil**
- ✓ **Ausatemventil**
- ✓ **T-Stück**
- ✓ **Verschlussstopfen**
- ✓ **Dichtring**
- ✓ **Prallplatte**
- ✓ **Medikamenteneinsatz**
- ✓ **Netzteil**
- ✓ **Gebrauchsanweisung**

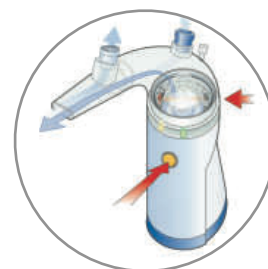






Technische Daten

Verneblungsart	Ultraschall	Therapie	Untere Atemwege
Nennspannung	100 - 240 V	Lautstärke	< 15 dB (A) geräuschlos
Nennfrequenz	50 - 60 Hz	Gewicht	0,6 kg (inkl. Netzteil)
Aufnahmeleistung	~ 12 VA	Maße [mm]	63 x 220 x 170
Schwingfrequenz	1,7 MHz	Max. Füllmenge	5 ml
Verneblerleistung	~ 0,6 ml/min	Min. Füllmenge	2 ml
Tröpfchengröße	MMAD ~ 3,5 - 4,5 µm	Restmenge	< 1ml




Art.-Nr.	PZN
81610	2416561

Ultraschallvernebler

Zubehör & Ersatzteile — Multisonic®

	Art.-Nr.	PZN	IC 83000 83001	IC 81610
 <p>Akku 12 V DC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koaxial-Steckverbindung - Wiederaufladbar - Überladeschutz - Ohne Memory-Effekt - Hohe Ladekapazität für 1 Stunde Betriebsdauer - LED Lade- und Kapazitätskontrollleuchte 	81310	2293383	✓	✓
 <p>Flexible Halterung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwanenhals (600 mm) - Universalklemme für Rohre (∅ 20 - 40 mm) und/oder Normschienen - Gerätehalter 	83255	99083743	✓	✓
 <p>Stativklemme mit Gerätehalter + Kugel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stativklemme zur Befestigung an einem Stativ mit Rundmetall- oder Rohrdurchmesser von 12 - 16 mm - Kugelpfanne (20 mm) zur Aufnahme des Gerätehalters - Gerätehalter mit Kugel 	83160	8438256	✓	✓
 <p>Medikamenteneinsätze (Mehrweg)</p> <p>10 Stück</p> <p>50 Stück</p>	85747	2293319	✓	✓
	85840	1454588		
 <p>Filtereinsätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 Stück - ∅ 45 mm 	85860	1531171	✓	✓

Zubehör & Ersatzteile — Multisonic®

	Art.-Nr.	PZN	IC 83000 83001	IC 81610
 <p>Responder Set - 1 Gänsegurgel - 1 Einweg-Mundstück mit Ausatemventil</p>	83230	3494250	✓	✓
 <p>Schlauchsystem Beatmung - 1 Faltenschlauch (0,4 m) - 1 Anschlusschlauch (1,8 m) - 1 Adapter 22M - 2 T-Stücke</p>	83100	2293288	✓	✗
 <p>Tracheostoma Set - 1 Silikon-Gänsegurgel - 1 T-Stück mit Ausatemventil</p>	83220	3494296	✓	✓
 <p>Vierteljahresset - 1 Filterhalter - 100 Filtereinsätze - 1 Verneblerkopf - 1 Mundstück - 2 Prellplatten - 2 Dichtringe - 1 Ventilset</p>	85710	0849528	✗	✓
 <p>Jahresseset Beatmung - 12 Verneblerköpfe - 12 Luer/Lock-Verschlusskappen - 12 Dichtringe</p>	83265		✓	✗